


小鼠神经母细胞瘤细胞 (N1E115 Cells)

细胞货号	T1007	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.细胞倾向于堆积生长, 培养过程中密度不宜过高。	
STR 数据	细胞没有公布的 STR 位点信息, 因此无 STR 数据	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

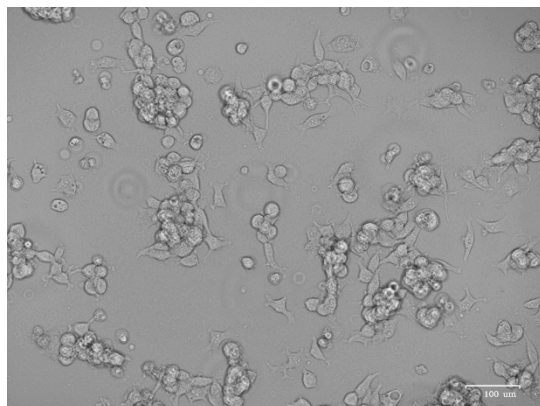

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com