


小鼠肺癌细胞 (LLC Cells)

细胞货号	T1016	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	半贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2 -1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95%空 气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• 4-2 : 20.3,21.3,23.3• 5-5 : 17,18• 6-4 : 18,• 6-7 : 14,15,16• 9-2 : 17,18,19• 12-1 : 17,• 15-3 : 22.3,24.3• 18-3 : 15,16• X-1 : 24,26,28	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	



订购: order.china@china-abm.com

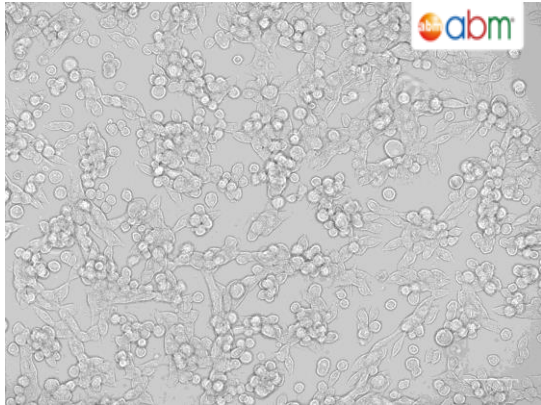

技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

