


人肺腺癌细胞 (NCI-H441 Cells)

细胞货号	T1017	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• Amelogenin X,Y • CSF1PO 11,12 • D2S441 14 • D2S1338 17,19 • D3S1358 18 • D5S818 11,12 • D6S1043 17 • D7S820 10 • D8S1179 8,14 • D12S391 19.3 • D13S317 9 • D16S539 9,13 • D18S51 18,19 • D19S433 14 • D21S11 32.2	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• FGA 24,25• Penta D 10,12• Penta E 12• TH01 9.3• TPOX 8,10• vWA 17 |
|--|--|

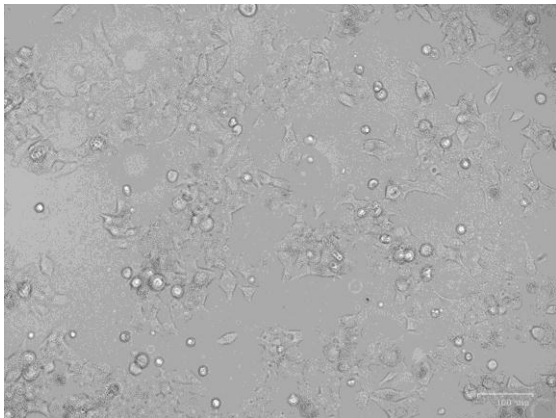

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

