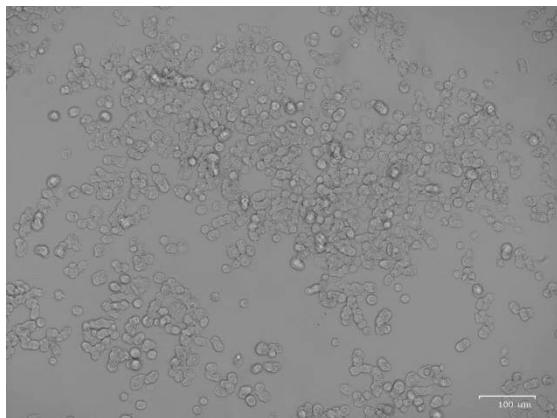


人结肠腺癌细胞 (SW48 Cells)

细胞货号	T1022	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	72-96 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	100% 空气, 温度 37°C	
培养基	Leibovitz's L-15 (abm Cat. No. TM507) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C. 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞使用 L-15 培养基, 培养过程中禁止通入二氧化碳。 2.该细胞复苏后恢复较慢, 初期培养会有细胞漂浮, 建议包被。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">D5S818 : 10,14D13S317 : 11,12D7S820 : 9,10D16S539 : 11,13VWA : 18,20,21TH01 : 6,9.3AMEL : X,XTPOX : 8,8CSF1PO : 9,10D12S391 : 20,20FGA : 20,20D2S1338 : 19,27	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



- D21S11 : 28,31
- D18S51 : 13,13
- D8S1179 : 13,14,15
- D3S1358 : 13,14,15
- D6S1043 : 11,18
- PENTAE : 12,13,14
- D19S433 : 14,14
- PENTAD : 10,10
- D1S1656 : 11,13

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com