


人结直肠腺癌细胞 (HCT-15 Cells)

细胞货号	T1026	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 13,13 • D13S317 : 8,11 • D7S820 : 10,12 • D16S539 : 12,13 • VWA : 18,19 • TH01 : 7,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 12,12 • D12S391 : 19,22 • FGA : 22,22 • D2S1338 : 17,25 • D21S11 : 29,32.2 • D18S51 : 11,17 • D8S1179 : 15,15	

T1026 – HCT115 Cells

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 17,17 • D6S1043 : 11,13 • PENTAE : 7,14 • D19S433 : 14,16 • PENTAD : 9,14 • D1S1656 : 17.3,19.3 |
|--|--|

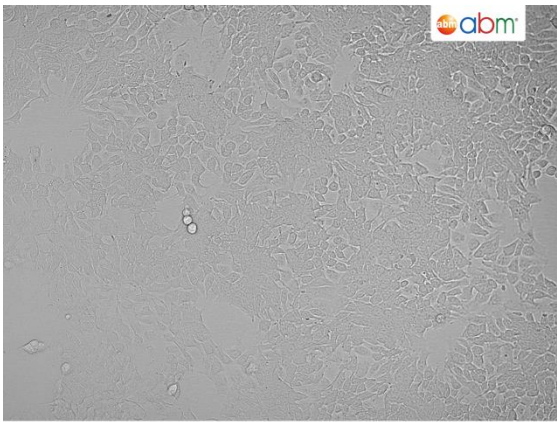

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

