


人结肠癌细胞 (HCT-116 Cells)

细胞货号	T1027	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37°C	
培养基	McCoy' s 5A (abm Cat. No. TM506) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 10,11 • D13S317 : 10,12 • D7S820 : 11,12 • D16S539 : 11,13 • VWA : 17,22 • TH01 : 8,9 • AMEL : X,X • TPOX : 8,8 • CSF1PO : 7,10 • D12S391 : 17,20,21 • FGA : 18,23 • D2S1338 : 16,16 • D21S11 : 29,30 • D18S51 : 16,17 • D8S1179 : 12,14	

- D3S1358 : 12,19
- D6S1043 : 13,13
- PENTAE : 13,14
- D19S433 : 12,13
- PENTAD : 9,13
- D1S1656 : 12,14

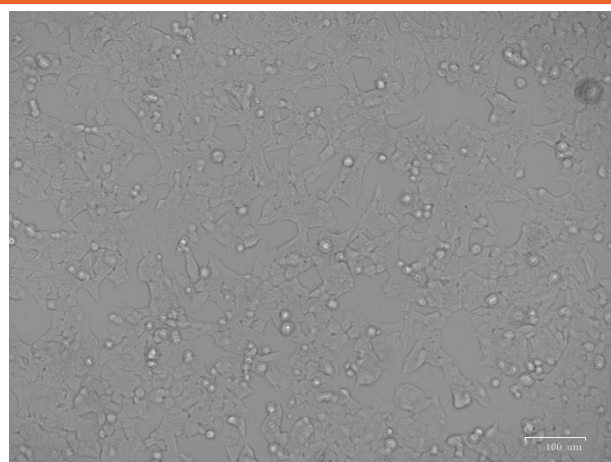

订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

