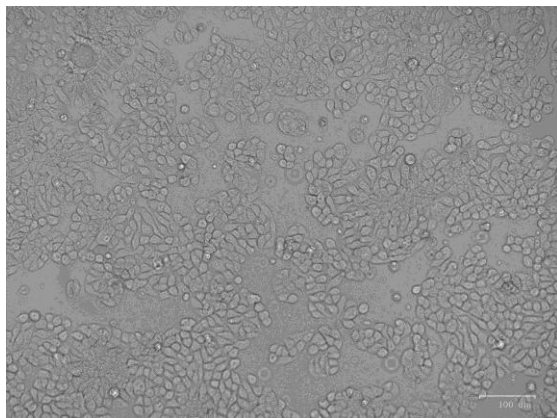


人结肠癌细胞 (HT29 Cells)

细胞货号	T1028	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	McCoy' s 5A (abm Cat. No. TM506) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/ Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• D5S818：11,12• D13S317：11,12• D7S820：10,10• D16S539：11,12• VWA：17,19• TH01：6,9• AMEL：X,X• TPOX：8,9• CSF1PO：11,12• D12S391：18.3,21• FGA：20,22• D2S1338：19,23	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com

更多细胞详情扫一扫
获取更多信息下载有问必答app
获取更多信息

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D21S11 : 29,30• D18S51 : 13,13• D8S1179 : 10,10• D3S1358 : 15,17• D6S1043 : 12,14• PENTAE : 14,16• D19S433 : 14,14• PENTAD : 11,13• D1S1656 : 15,16 |
|--|---|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com