


人卵巢癌细胞 (SK-OV-3 Cells)

细胞货号	T1037	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	McCoy' s 5A (abm Cat. No. TM506) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	- D5S818 : 11,11 - D13S317 : 8,11 - D7S820 : 13,14 - D16S539 : 12,12 - VWA : 17,18 - TH01 : 9,9.3 - AMEL : X,X - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 11,11 - D12S391 : 22,22 - FGA : 24,25,26 - D2S1338 : 18,23 - D21S11 : 30,31.2 - D18S51 : 16,17,18 - D8S1179 : 14,15	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 14,14 • D6S1043 : 12,12 • PENTAE : 5,13 • D19S433 : 14,14.2 • PENTAD : 12,13 • D1S1656 : 11,17.3 |
|--|---|

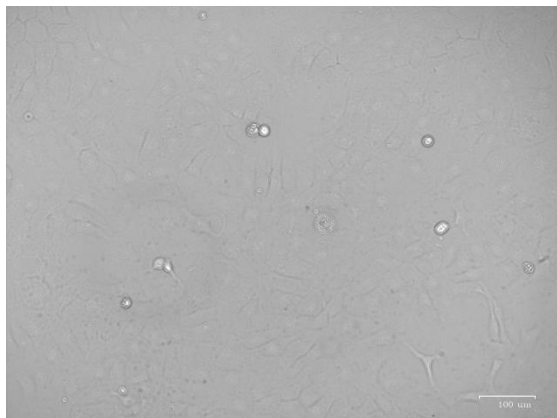

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

