


人前列腺癌细胞 (DU145 Cells)

细胞货号	T1043	 T1043– HTB-81 (DU145) (Human Prostate Carcinoma)
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:6, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	50% 完全培养基 + 40%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞对冻存敏感, 冻存液比例建议为: 50% 完全培养基 + 40%FBS + 10%DMSO	
STR 数据	- D5S818 : 10,13 - D13S317 : 12,13,14 - D7S820 : 7,10,11 - D16S539 : 11,11 - VWA : 17,18,19 - TH01 : 7,7 - AMEL : X,Y - TPOX : 11,11 - CSF1PO : 10,11 - D12S391 : 17,18,21 - FGA : 21,22 - D2S1338 : 16,16 - D21S11 : 30,33,34 - D18S51 : 12,12 - D8S1179 : 13,14	



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息

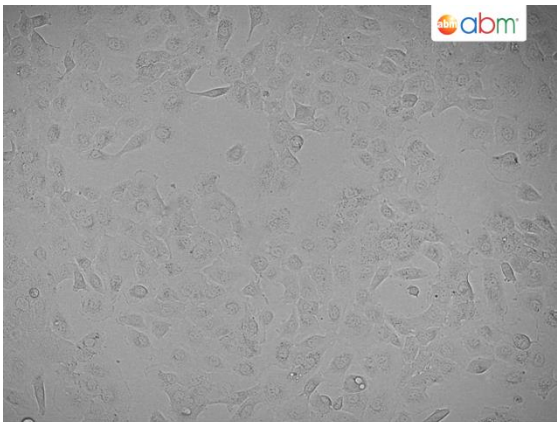

下载有问必答app
获取更多优惠信息



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16,16 • D6S1043 : 11,11 • PENTAE : 12,14 • D19S433 : 12,13 • PENTAD : 9,13 • D1S1656 : 15,16,17.3 |
|--|--|



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

