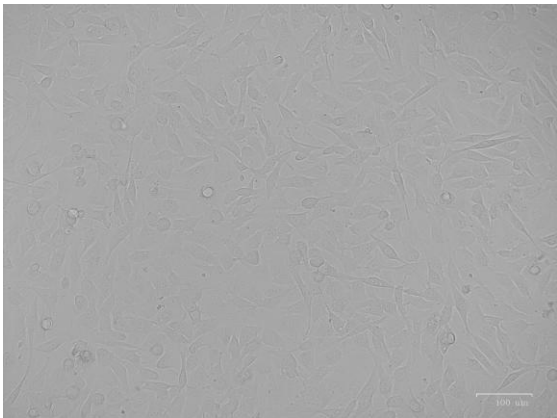


人膀胱移行细胞癌细胞 (T24 Cells)

细胞货号	T1051	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	McCoy' s 5A (abm Cat. No. TM507) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• Amelogenin X • CSF1PO 10,12 • D2S1338 20,23 • D3S1358 16 • D5S818 10,12 • D7S820 10,11 • D8S1179 14 • D13S317 12 • D16S539 9 • D18S51 16,18 • D19S433 13,14 D21S11 29 • FGA 17,22 • PentaD 11,15 • PentaE 7,10 • TH01 6	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • TPOX 8,11 • vWA 17 • D6S1043 11 • D12S391 18 • D2S441 11,15 |
|--|---|