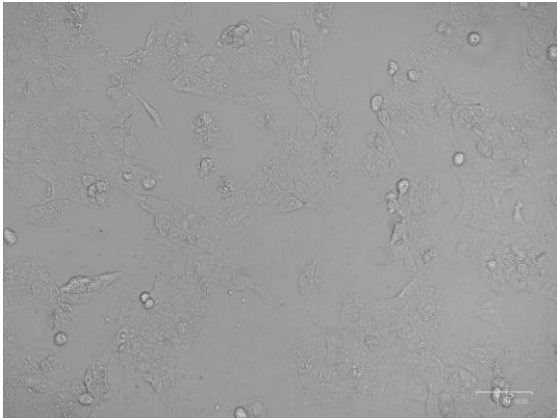


人绒毛膜癌细胞 (JEG-3 Cells)

细胞货号	T1056	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:6, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 10,11 • D13S317 : 9,11 • D7S820 : 10,12 • D16S539 : 13,14 • VWA : 16,16 • TH01 : 9,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,8 • CSF1PO : 11,12 • D12S391 : 17,20,24 • FGA : 23,24 • D2S1338 : 24,24	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D21S11 : 30,30• D18S51 : 14,14• D8S1179 : 12,12• D3S1358 : 15,16• D6S1043 : 11,11• PENTAE : 8,12• D19S433 : 13,15• PENTAD : 9,12• D1S1656 : 14,16 |
|--|---|

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com