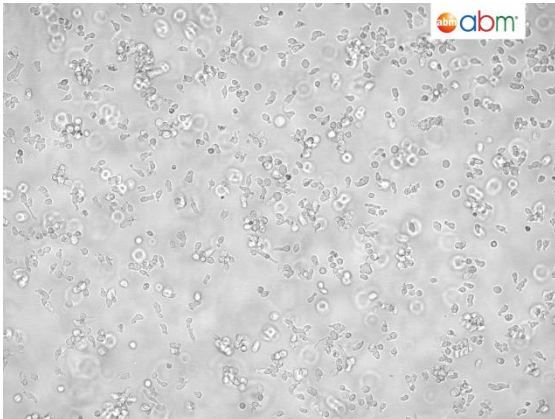


## 小鼠淋巴瘤细胞 (EL-4 Cells)

细胞货号	T1062	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM ( abm Cat. No. TM500) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	● 细胞没有公布的 STR 位点信息, 因此无 STR 数据。	

T1062 – EL-4 Cells

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

