


## 小鼠肾小球系膜细胞 (MES-13 Cells)

细胞货号	T1067	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成纤维细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	DMEM：Ham's F-12（3：1）+ 5% FBS（abm Cat. No. TM999）+ 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞有一定的密度依赖性，初始接种密度不宜低于 30%。	
STR 数据	<div><div></div><div>该细胞没有公布的 STR 位点信息，因此无 STR 数据</div></div>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

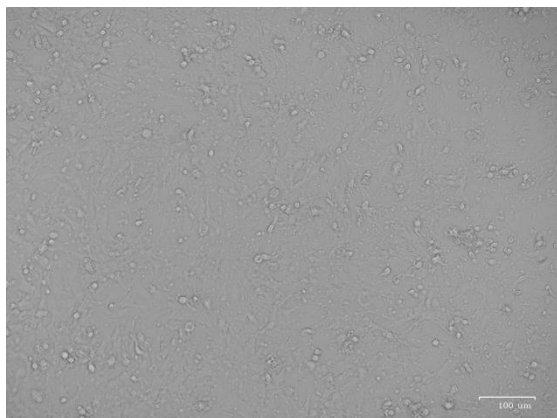

更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多信息

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)