


人非小细胞肺癌细胞 (A549 Cells)

细胞货号	T1077	 T1077 – A549 Cells (Human lung carcinoma)
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
STR 数据	- D5S818 : 11,11 - D13S317 : 11,11 - D7S820 : 8,11 - D16S539 : 11,12 - VWA : 14,14 - TH01 : 8,9.3 - AMEL : X,Y - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 10,12 - D12S391 : 18,18 - FGA : 23,23 - D2S1338 : 24,24 - D21S11 : 29,29 - D18S51 : 14,17 - D8S1179 : 13,14 - D3S1358 : 16,16 - D6S1043 : 11,13 - PENTAE : 7,11 - D19S433 : 13,13 - PENTAD : 9,9 - D1S1656 : 17,18.3	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	



订购: order.china@china-abm.com

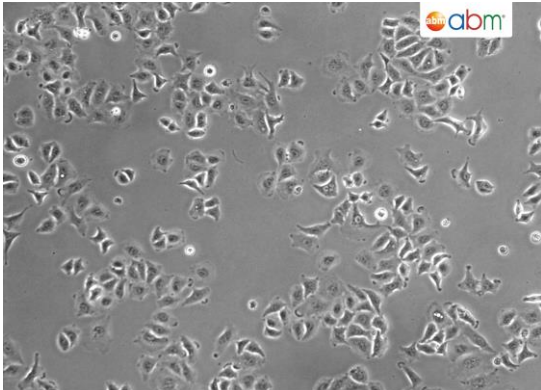

技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

