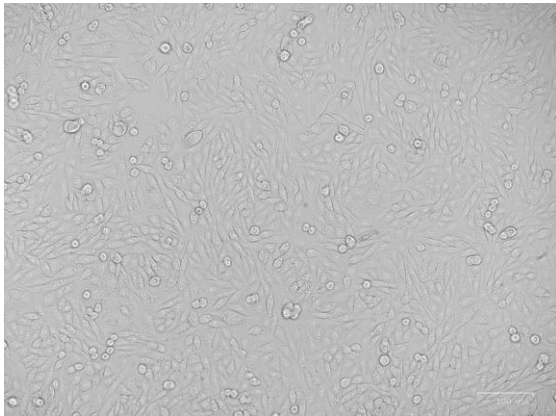


仓鼠卵巢细胞 (CHO Cells)

细胞货号	T1095	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成纤维细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<div><div></div><div>细胞没有公布的 STR 位点信息, 因此无 STR 数据</div></div>	