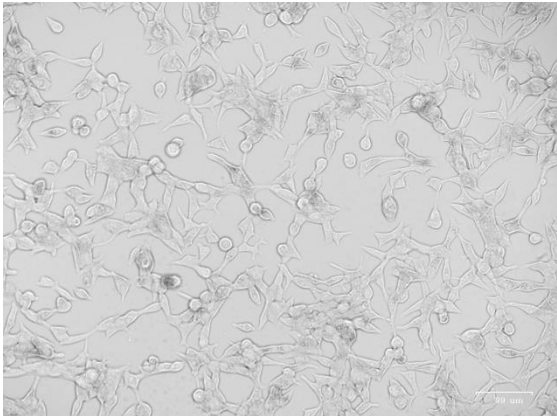


人前列腺癌细胞 (LNCaP Cells)

细胞货号	T1117	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	72-96 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞容易聚团生长, 出现较多细胞团时应及时传代。 2.该细胞正常培养贴壁能力差, 培养需要使用多聚-L-赖氨酸包被过的培养皿。 3.该细胞生长慢, 复苏传代后不宜过多移动。 4.培养该细胞过程中, 培养基容易变黄, 是正常现象。	
STR 数据	- D5S818 : 11,12 - D13S317 : 10,12 - D7S820 : 9.1,10.3 - D16S539 : 11,11 - VWA : 16,18 - TH01 : 9,9 - AMEL : X,Y - TPOX : 8,9 - CSF1PO : 10,11 - D12S391 : 21,22	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



- FGA : 19,20
- D2S1338 : 16,16
- D21S11 : 29,31.2,32.2
- D18S51 : 11,12
- D8S1179 : 12,14
- D3S1358 : 15,16
- D6S1043 : 11,18
- PENTAE : 12,16
- D19S433 : 13.2,15
- PENTAD : 12,13
- D1S1656 : 16,16

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com