


人神经胶质瘤细胞 (LN-18 Cells)

细胞货号	T1124	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 5% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,13 • D13S317 : 12,13 • D7S820 : 8,10 • D16S539 : 11,13 • VWA : 17,18 • TH01 : 9,9 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,8 • CSF1PO : 12,12 • D12S391 : 17,19 • FGA : 19,23 • D2S1338 : 17,17 • D21S11 : 28,28 • D18S51 : 17,19 • D8S1179 : 12,14	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 15,16 • D6S1043 : 12,19 • PENTAE : 7,10 • D19S433 : 12,15 • PENTAD : 11,11 • D1S1656 : 17.3,17.3 |
|--|---|

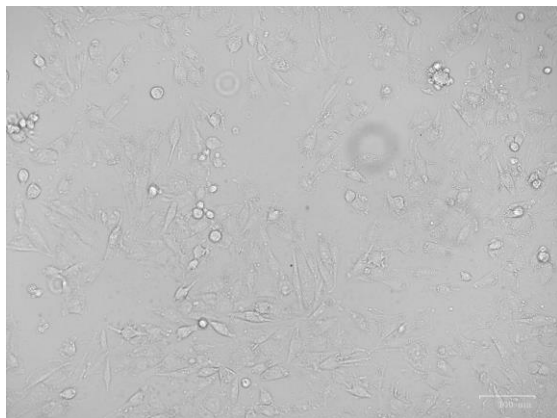

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

