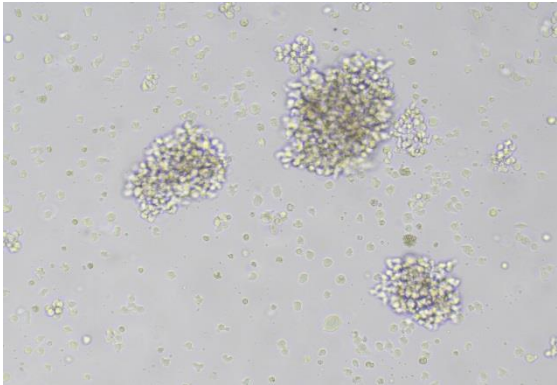


人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 (NK-92MI Cells)

细胞货号	T1131	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM-α + 25%FBS + 12.5% HS + 0.2mM inositol + 0.1 mM 2-mercaptoethanol + 0.02mM folic Acid + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ .	
冻存条件	50% 完全培养基 + 40%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞聚团生长, 且对机械力敏感。聚团严重时可轻轻吹打, 不必吹打至分散为单个细胞, 以免细胞死亡。 2.该细胞因聚团生长, 过程中会出现较多的死细胞及细胞碎片。可通过低速离心(800RPMI)去除部分死细胞及碎片。 3.冻存时, 尽量将细胞吹散, 以免影响冻存效果。 4.该细胞对 DMSO 敏感, 建议使用无血清冻存液。 5.培养基中的 2-mercaptoethanol 需要现用现加, 细胞培养 3 天后需换液或额外补充 2-mercaptoethanol	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

STR 数据

- D5S818 : 12,13
- D13S317 : 9,12
- D7S820 : 10,11
- D16S539 : 11,12
- VWA : 18,18
- TH01 : 6,9.3
- AMEL : X,Y
- TPOX : 8,8
- CSF1PO : 11,12
- D12S391 : 19,19
- FGA : 20,22
- D2S1338 : 19,20
- D21S11 : 27,32
- D18S51 : 12,17
- D8S1179 : 12,12
- D3S1358 : 15,15
- D6S1043 : 11,12
- PENTAE : 12,12
- D19S433 : 14,15
- PENTAD : 12,13
- D1S1656 : 12,14

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com