


人食管鳞癌细胞 (KYSE-410 Cells)

细胞货号	T1146	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 13 13 • D13S317 11 11 • D7S820 12 12 • D16S539 10 12 • VWA 16 18 • TH01 8 8 • AMEL X X • TPOX8 11 • CSF1PO 12 12 • D12S391 17 19 • FGA 20 20 • D2S1338 17 19 • D21S11 30 30 • D18S51 13 15 • D8S1179 10 10	



订购: order.china@china-abm.com

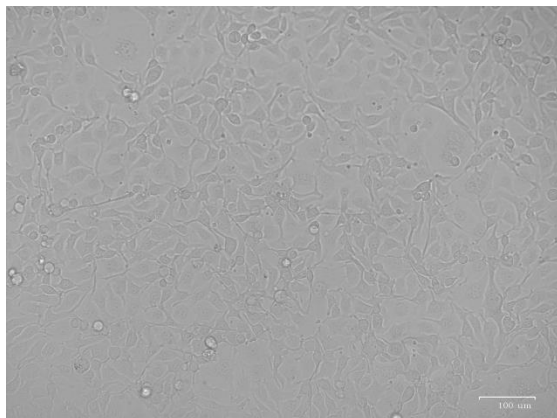

技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



	• D3S1358 15 16 • D6S1043 13 15 • PENTAE 8 12 • D19S433 13 13 • PENTAD 11 11 • D1S1656 13 15
--	---



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

