


人转移胰腺腺癌细胞 (AsPC-1 Cells)

| | | |
|--------------|---|--|
| 细胞货号 | T1151 |  |
| 细胞总数 | 1 x 10 ⁶ cells | |
| 生长特性 | 贴壁生长 | |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | |
| 倍增时间 | 48-72 h | |
| 传代比例 | 1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次 | |
| 培养环境 | 95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C | |
| 培养基 | RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。 | |
| 冻存条件 | 70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO | |
| 细胞储存 | 液氮储存 | |
| 细胞培养 注意事项 | 1. 该细胞培养贴壁松散, 避免消化时间过长, 传代后需要 24-48h 贴壁。 2.该细胞有一定的密度依赖性, 初始接种密度不宜低于 40%。 | |
| STR 数据 | <ul style="list-style-type: none">D5S818 : 12,12D13S317 : 9,12D7S820 : 12,13D16S539 : 11,11VWA : 17,17TH01 : 7,9.3AMEL : X,XTPOX : 8,10CSF1PO : 10,13D12S391 : 19,19FGA : 24,24D2S1338 : 22,23D21S11 : 28,30D18S51 : 18,18D8S1179 : 13,15 | |

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16,16 • D6S1043 : 11,20 • PENTAE : 5,12 • D19S433 : 14,14 • PENTAD : 9,12 • D1S1656 : 12,18.3 |
|--|--|

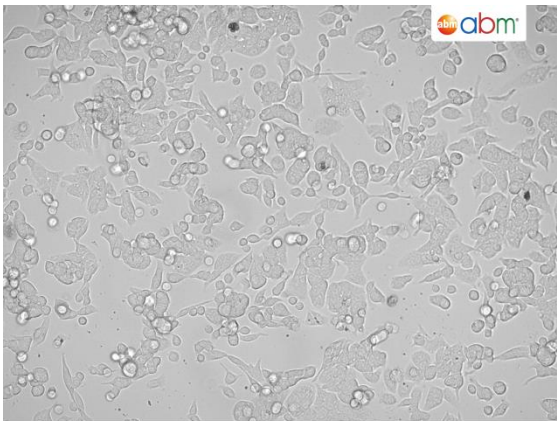

订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

