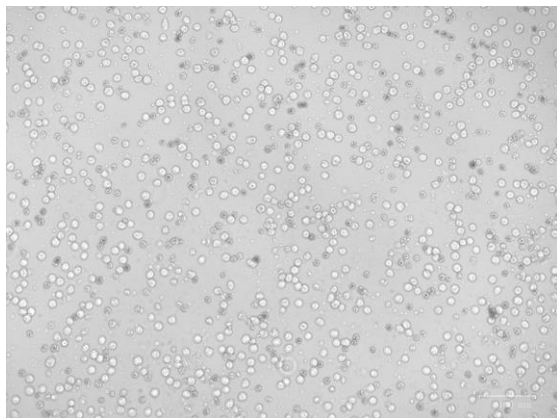


人淋巴细胞白血病细胞 (RS4;11 Cells)

细胞货号	T1154	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞生长过程中会有聚团倾向, 聚团严重时可轻轻吹打。	
STR 数据	• D5S818 : 12,13 • D13S317 : 11,11 • D7S820 : 8,12 • D16S539 : 11,12 • VWA : 14,17 • TH01 : 6,9.3 • AMEL : X,X • TPOX : 8,8 • CSF1PO : 11,12 • D12S391 : 19,21 • FGA : 24,25 • D2S1338 : 20,25 • D21S11 : 28,29,30 • D18S51 : 12,16	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• D8S1179 : 13,14• D3S1358 : 15,17• D6S1043 : 12,19• PENTAE : 5,7• D19S433 : 12,14• PENTAD : 8.3,10• D1S1656 : 16,18.3 |
|--|--|

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com