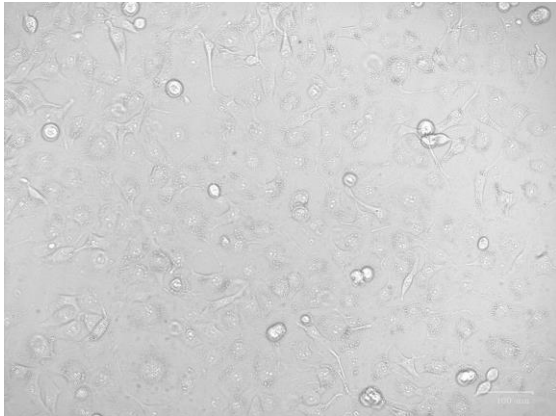


人滤泡状甲状腺癌细胞 (FTC-133 Cells)

细胞货号	T1161	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞生长较慢, 传代比例不宜过高, 初始接种密度不宜低于 30%。	
STR 数据	• D5S818 : 11,12 • D13S317 : 11,11 • D7S820 : 9,10 • D16S539 : 11,11 • VWA : 15,18 • TH01 : 9.3,9.3 • AMEL : X,X • TPOX : 9,9 • CSF1PO : 10,11 • D12S391 : 21,22 • FGA : 21,21 • D2S1338 : 20,20	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

- D21S11 : 32.2,32.2
- D18S51 : 11,12
- D8S1179 : 10,10
- D3S1358 : 15,15
- D6S1043 : 19,19
- PENTAE : 13,13
- D19S433 : 12,13
- PENTAD : 12,12
- D1S1656 : 15,15

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com