


## 人胚肾细胞 (293A Cells)

细胞货号	T1165	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM ( abm Cat. No. TM500) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> .  推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.293A 贴壁性较差, 换液时需要轻柔, 容易飘起来, 轻拿轻放。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>D5S818 : 8, 8</li><li>D13S317 : 12,14</li><li>D7S820 : 11,11</li><li>D16S539 : 9,13</li><li>VWA : 16,19</li><li>TH01 : 7,9.3</li><li>AMEL : X,X</li><li>TPOX : 11,11</li><li>CSF1PO : 12,12</li><li>D12S391 : 19,21</li><li>FGA : 23,23</li><li>D2S1338 : 19,19</li><li>D21S11 : 30.2,30.2</li><li>D18S51 : 17,17</li><li>D8S1179 : 12,14</li></ul>	

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3S1358 : 15,17</li> <li>• D6S1043 : 11,11</li> <li>• PENTAE : 7,15</li> <li>• D19S433 : 15,18</li> <li>• PENTAD : 9,10</li> <li>• D1S1656 : 15,17.3</li> </ul> |
|--|--|

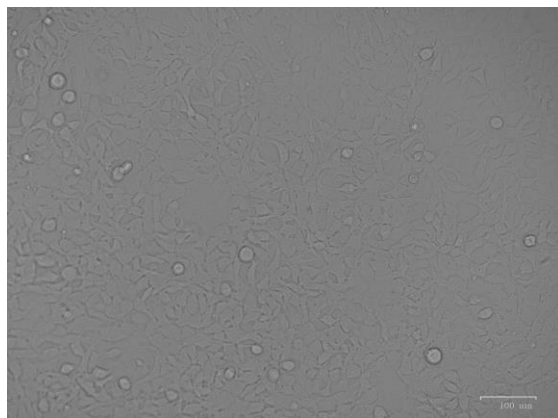

更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

