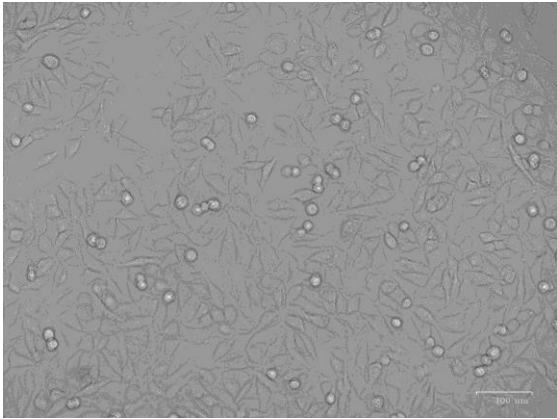


人恶性黑色素瘤细胞 (A375 Cells)

细胞货号	T1172	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">D5S818 : 12,12D13S317 : 11,14D7S820 : 9,9D16S539 : 9,9VWA : 16,17TH01 : 8,8AMEL : X,XTPOX : 8,10CSF1PO : 11,12D12S391 : 18,21FGA : 23,23D2S1338 : 16,24	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• D21S11 : 29,30• D18S51 : 12,17• D8S1179 : 11,14• D3S1358 : 15,17• D6S1043 : 11,14• PENTAE : 10,12• D19S433 : 13,14.2• PENTAD : 9,15• D1S1656 : 16,17.3 |
|--|--|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com