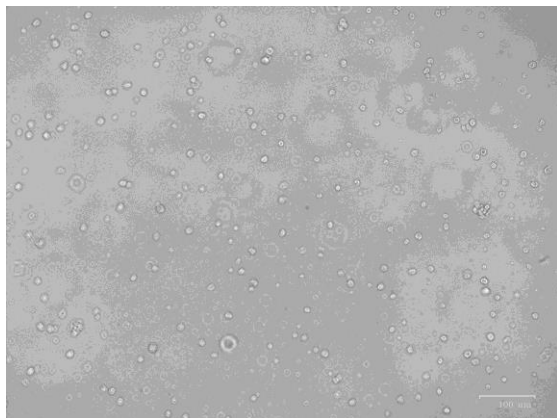


人淋巴母细胞 (T2 Cells)

细胞货号	T1174	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	圆形	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞形状多为圆形, 部分细胞会出现其他的形状, 是正常现象。 2.该细胞生长过程中有成簇倾向, 堆积严重时轻轻吹打。	
STR 数据	- D5S818 : 12,14 - D13S317 : 11,12 - D7S820 : 10,11,15 - D16S539 : 10,12 - VWA : 14,17,20 - TH01 : 6,7,9,3 - AMEL : X,X - TPOX : 8,12 - CSF1PO : 11,12 - D12S391 : 17,20,24 - FGA : 23,23 - D2S1338 : 18,24,25 - D21S11 : 28,30 - D18S51 : 12,13,17 - D8S1179 : 10,13,14	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 14,15,16 • D6S1043 : 11,14 • PENTAE : 5,12,14 • D19S433 : 12,14 • PENTAD : 11,12,14 • D1S1656 : 12,13,16.3 |
|--|---|