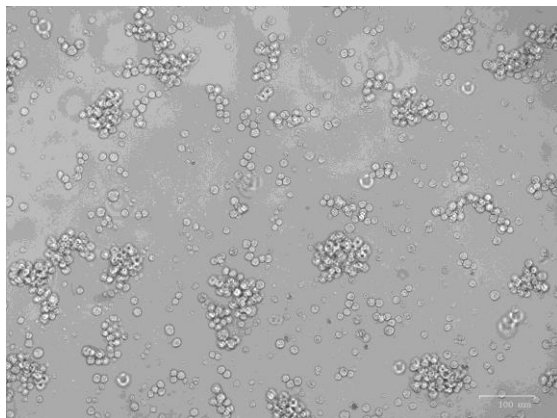


人 Burkitt's 淋巴瘤细胞 (Daudi Cells)

细胞货号	T1209	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• D5S818 : 8,13• D13S317 : 11,12• D7S820 : 8,10• D16S539 : 10,12• VWA : 15,17• TH01 : 6,7• AMEL : X,Y• TPOX : 8,11• CSF1PO : 12,12• D12S391 : 17,20• FGA : 21,26• D2S1338 : 17,24• D21S11 : 34,35• D18S51 : 16,18	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D8S1179 : 14,14• D3S1358 : 16,18• D6S1043 : 11,20• PENTAE : 7,9• D19S433 : 12,14• PENTAD : 10,12• D1S1656 : 16,16.3 |
|--|---|

 电话: 400-833-1885

 网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



 订购: order.china@china-abm.com

 技术: technical.china@abmGood.com