


人多发性骨髓瘤外周血 B 淋巴细胞 (RPMI-8226 Cells)

细胞货号	T1215	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞生长过程中会有部分细胞贴壁生长。 2.该细胞的大小及形状并不单一, 是正常现象。 3.若细胞生长速度慢或状态较差可尝试在培养基中添加 2mM 谷氨酰胺。	
STR 数据	- D5S818 : 11,13 - D13S317 : 11,11 - D7S820 : 9,10 - D16S539 : 9,9 - VWA : 16,18 - TH01 : 8,8 - AMEL : X,Y - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 12,12 - D12S391 : 16,19 - FGA : 19,19 - D2S1338 : 20,20 - D21S11 : 28,29	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D18S51 : 15,19 • D8S1179 : 13,13 • D3S1358 : 16,17 • D6S1043 : 14,18 • PENTAE : 16,17 • D19S433 : 13.2,14 • PENTAD : 3,11 • D1S1656 : 13,13 |
|--|--|

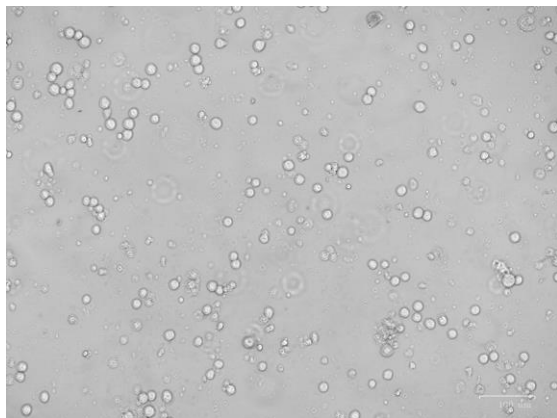

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

