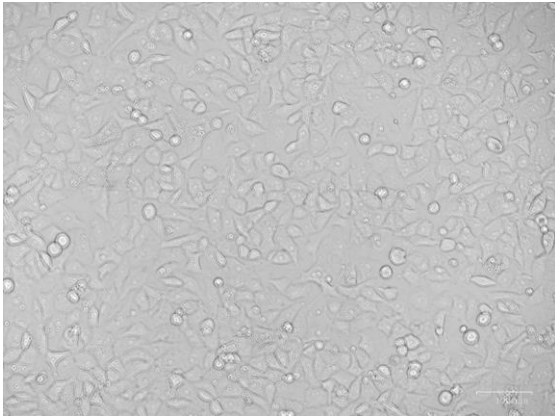


人十二指肠腺癌 (HuTu80 Cells)

细胞货号	T1217	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 12,13 • D13S317 : 8,11 • D7S820 : 9,11 • D16S539 : 10,11 • VWA : 16,18 • TH01 : 7,7 • AMEL : X,Y • TPOX : 9,11 • CSF1PO : 11,13 • D12S391 : 18,19 • FGA : 21,23 • D2S1338 : 17,21 • D21S11 : 31,32.2 • D18S51 : 14,17 • D8S1179 : 15,15	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 15,17 • D6S1043 : 13,14 • PENTAE : 12,17 • D19S433 : 13,15.2 • PENTAD : 3,3 • D1S1656 : 12,16.3 |
|--|--|