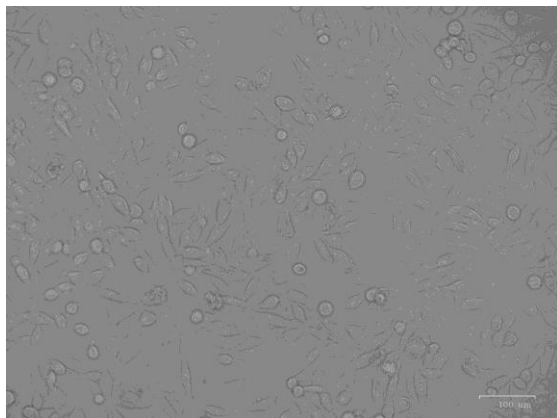


人前列腺癌细胞 (PC-3M Cells)

细胞货号	T1227	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	- D5S818 : 13,13 - D13S317 : 11,11 - D7S820 : 8,11 - D16S539 : 11,11 - VWA : 17,17 - TH01 : 6,7 - AMEL : X,X - TPOX : 8,9 - CSF1PO : 11,11 - D12S391 : 21,21 - FGA : 24,24 - D2S1338 : 18,20	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



- D21S11 : 29,31.2
- D18S51 : 14,15
- D8S1179 : 13,13
- D3S1358 : 16,16
- D6S1043 : 14,18
- PENTAE : 10,17
- D19S433 : 14,14
- PENTAD : 9,9
- D1S1656 : 12,16

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com