


小鼠胚胎成纤维 (3T3-L1 Cells)

细胞货号	T1228	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成纤维细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1. 该细胞不耐低密度，密度低生长缓慢，建议高密度传代培养	
STR 数据	• 4-2 : 19.3, • 5-5 : 13,15 • 6-4 : 15.3, • 6-7 : 12,15 • 9-2 : 15, • 12-1 : 19, • 15-3 : 20.3, • 18-3 : 17,21 • X-1 : 26,	



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息

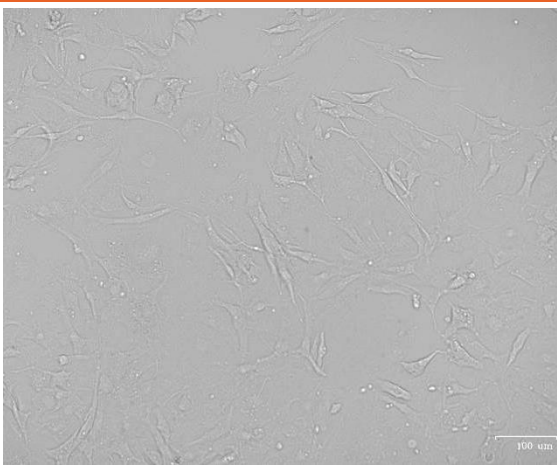

下载有问必答app
获取更多优惠信息

