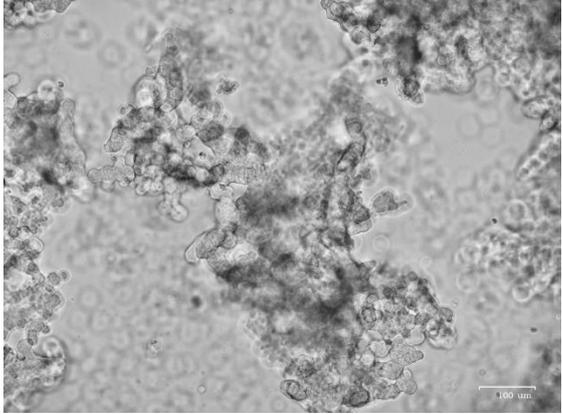


## 人小细胞肺癌细胞 (NCI-H526 Cells)

细胞货号	T1232	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	悬浮生长	
细胞形态	圆形聚团	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.该细胞是悬浮细胞, 换液传代时不要直接将培养基吸走。</li> <li>2.该细胞聚团生长, 培养过程中可轻轻吹打将聚团细胞吹散。</li> <li>3.冻存时尽量将细胞吹散, 以免影响冻存效果。</li> </ol>	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D5S818 : 11,11</li> <li>• D13S317 : 13,13</li> <li>• D7S820 : 9,12</li> <li>• D16S539 : 9,9</li> <li>• VWA : 16,17</li> <li>• TH01 : 6,8</li> <li>• AMEL : X,Y</li> <li>• TPOX : 8,11</li> <li>• CSF1PO : 11,11</li> <li>• D12S391 : 15,18</li> <li>• FGA : 22,22</li> <li>• D2S1338 : 23,24</li> </ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息

下载有问必答app  
获取更多优惠信息



- D21S11 : 27,32.2
- D18S51 : 12,15
- D8S1179 : 14,14
- D3S1358 : 17,17
- D6S1043 : 11,11
- PENTAE : 5,13
- D19S433 : 13,15
- PENTAD : 13,14
- D1S1656 : 17,17.3

 电话: 400-833-1885

 网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

 订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

 技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

