


人血管平滑肌细胞 (T/G HA-VSMC Cells)

细胞货号	T1233	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	平滑肌细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	Ham's F12K + 0.05mg/ml ascorbic acid + 0.01 mg/ml bovine insulin + 0.01mg/ml transferrin + 10ng/ml sodium selenite + 0.03mg/ml ECGS + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 10mM HEPES +10mM TES + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞建议使用专用培养基。	
STR 数据	- D5S818 : 12,13 - D13S317 : 11,12 - D7S820 : 9,10 - D16S539 : 12,12 - VWA : 16,16 - TH01 : 7,8 - AMEL : X,X - TPOX : 8,8 - CSF1PO : 10,11 - D12S391 : 18,21 - FGA : 21,22 - D2S1338 : 20,20	

- D21S11 : 30,31
- D18S51 : 18,22
- D8S1179 : 13,13
- D3S1358 : 15,18
- D6S1043 : 11,20
- PENTAE : 12,13
- D19S433 : 13,14
- PENTAD : 9,13
- D1S1656 : 11,17.3

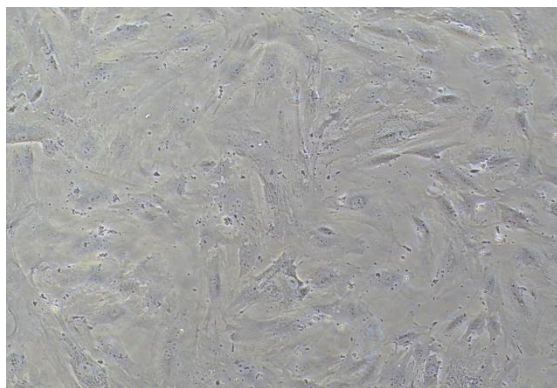