


## 人小肠上皮细胞 (FHs 74 Int Cells)

细胞货号	T1235	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	Hybri-Care Medium (ATCC 46-X) + 30ng/ml hEGF+ 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C. <b>推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。</b>	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D5S818 : 11,12</li> <li>• D13S317 : 11,12</li> <li>• D7S820 : 9,10</li> <li>• D16S539 : 11,12</li> <li>• VWA : 16,18</li> <li>• TH01 : 7,9.3</li> <li>• AMEL : X,X</li> <li>• TPOX : 8,8</li> <li>• CSF1PO : 10,11</li> <li>• D12S391 : 18,20,21</li> <li>• FGA : 21,21</li> <li>• D2S1338 : 20,24</li> <li>• D21S11 : 28,29</li> <li>• D18S51 : 13,16</li> <li>• D8S1179 : 12,15</li> </ul>	

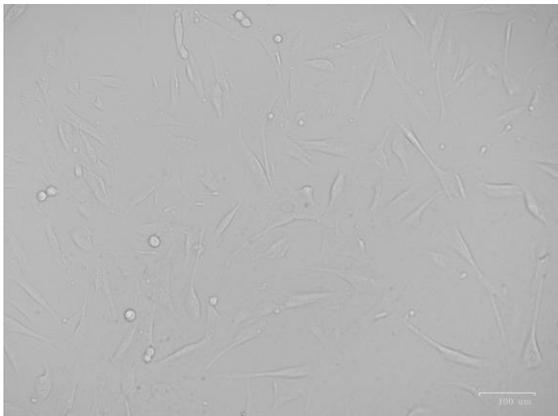

- D3S1358 : 15,18
- D6S1043 : 12,14
- PENTAE : 5,7
- D19S433 : 13,15
- PENTAD : 9,13
- D1S1656 : 17,18

 电话: 400-833-1885

 网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

 订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

 技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

