


## 人肺腺癌细胞 (SPC-A1 Cells)

细胞货号	T1901	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>该细胞是 Hela 污染细胞系。</li></ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

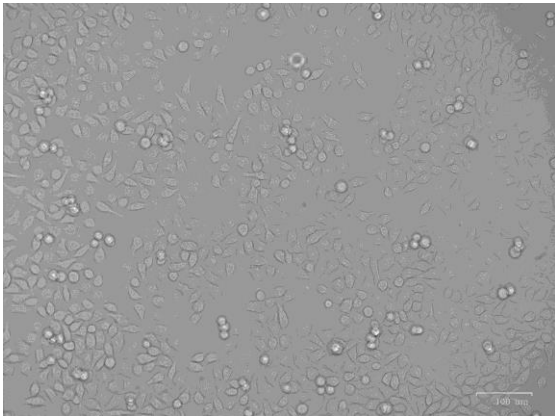

更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)