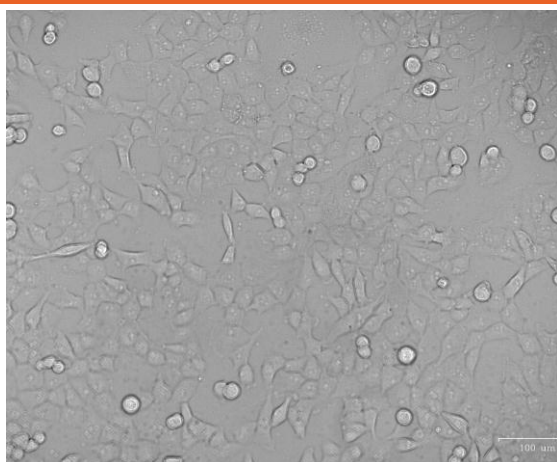


人胰腺癌细胞 (PANC-1 Cells)

细胞货号	T1911	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818：11,13 • D13S317：11,11 • D7S820：8,10 • D16S539：11,12 • VWA：15,15 • TH01：7,8 • AMEL：X,X • TPOX：8,11 • CSF1PO：10,12 • D12S391：22,22 • FGA：21,21 • D2S1338：23,24 • D21S11：28,28 • D18S51：12,12 • D8S1179：14,15	

	• D3S1358 : 17,17 • D6S1043 : 11,12 • PENTAE : 7,14 • D19S433 : 11,16 • PENTAD : 14,14 • D1S1656 : 12,14
--	---