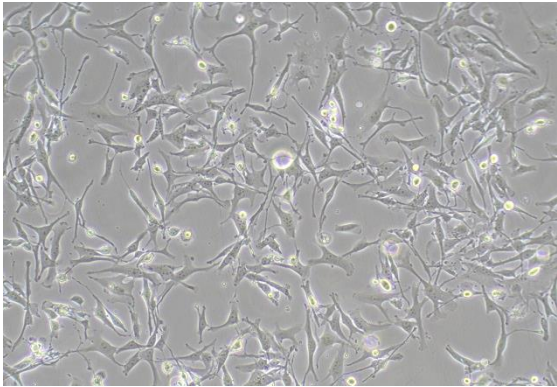


人小细胞肺癌细胞 (SW1271 Cells)

细胞货号	T7001	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	Leibovitz's Leibovitz's L-15 (abm Cat. No. TM507) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C. 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 12 • D13S317 : 13 • D7S820 : 9,12 • D16S539 : 11,12 • VWA : 17,20 • TH01 : 7,8 • AMEL : X • TPOX : 8 • CSF1PO : 11 • D12S391 : 18,20 • FGA : 20 • D2S1338 : 23 • D21S11 : 29,31.2 • D18S51 : 14 • D8S1179 : 13,16	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 15 • D6S1043 : 11,17 • PENTAE : 5,12 • D19S433 : 14 • PENTAD : 10,12 • D2S441 : 11 |
|--|---|