


人结肠癌长春新碱耐药株 (HCT8/VCR Cells)

细胞货号	T8236	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞是从 HCT-8 细胞中筛选的长春新碱耐药株, 培养过程中应在培养基中添加 400 ng/ml VCR。(长期筛选使用 800 ng/ml VCR)	
STR 数据	- D5S818 : 13,13 - D13S317 : 8,11 - D7S820 : 10,11.3 - D16S539 : 12,13 - VWA : 18,19 - TH01 : 7,9.3 - AMEL : X,X - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 12,12 - D12S391 : 19,22 - FGA : 22,22 - D2S1338 : 17,25 - D21S11 : 29,32.2 - D18S51 : 11,17 - D8S1179 : 15,15	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 17,17 • D6S1043 : 11,13 • PENTAE : 7,14 • D19S433 : 14,16 • PENTAD : 9,14 • D1S1656 : 17.3,19.3 |
|--|--|

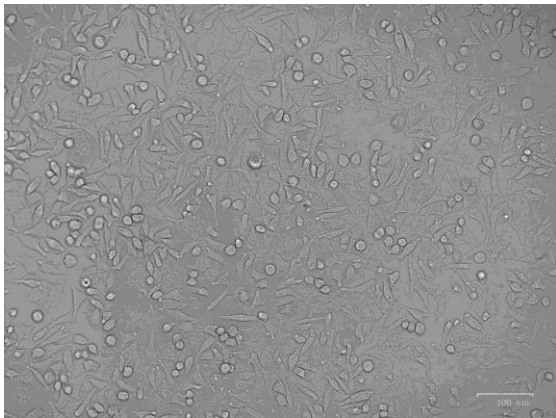