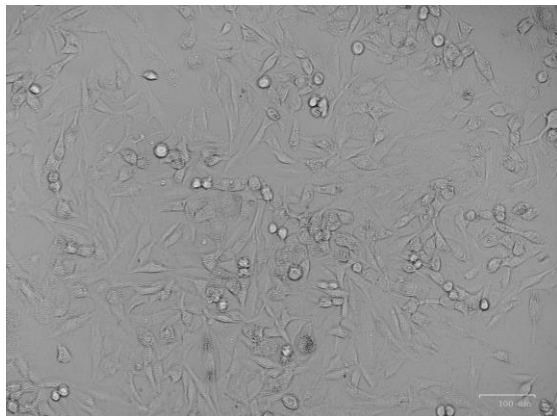


人肺腺癌细胞 (NCI-H1975 Cells)

细胞货号	T9028	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,12 • D13S317 : 10,13 • D7S820 : 8,8 • D16S539 : 9,12 • VWA : 18,18 • TH01 : 7,7 • AMEL : X,X • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 12,12 • D12S391 : 17,17 • FGA : 21,24 • D2S1338 : 17,17	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息下载有问必答app
获取更多优惠信息

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D21S11 : 28,28• D18S51 : 13,13• D8S1179 : 13,13• D3S1358 : 14,15• D6S1043 : 12,12• PENTAE : 12,12• D19S433 : 15,15.2• PENTAD : 12,13• D1S1656 : 14,15 |
|--|---|

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com