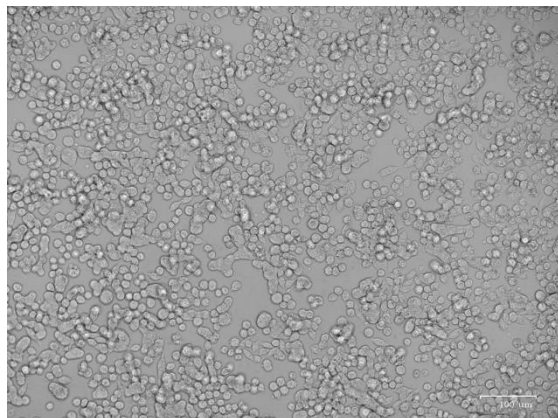


## 人结肠癌细胞 (SW620 Cells)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞货号         | T9086                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 细胞总数         | 1 x 10 <sup>6</sup> cells                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 生长特性         | 贴壁生长                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| 细胞形态         | 上皮细胞样                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 倍增时间         | 24-48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 传代比例         | 1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| 培养环境         | 100% 空气, 温度 37°C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| 培养基          | Leibovitz's L-15 ( abm Cat. No. TM507) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C.<br><br>推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。                                                                                                    |                                                                                    |
| 冻存条件         | 70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 细胞储存         | 液氮储存                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| 细胞培养<br>注意事项 | 1、该细胞推荐使用 Leibovitz's L-15 培养基进行培养, Leibovitz's L-15 不可以通入二氧化碳, 会产生细胞毒性。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| STR 数据       | <ul style="list-style-type: none"><li>D5S818 : 13,13</li><li>D13S317 : 12,12</li><li>D7S820 : 8,9</li><li>D16S539 : 9,9</li><li>VWA : 16,16</li><li>TH01 : 8,8</li><li>AMEL : X,X</li><li>TPOX : 11,11</li><li>CSF1PO : 13,14</li><li>D12S391 : 17,17</li><li>FGA : 24,24</li><li>D2S1338 : 24,24</li></ul> |                                                                                    |

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多信息



- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• D21S11 : 30,30.2</li><li>• D18S51 : 13,13</li><li>• D8S1179 : 13,13</li><li>• D3S1358 : 15,16</li><li>• D6S1043 : 11,12</li><li>• PENTAE : 10,10</li><li>• D19S433 : 13,13</li><li>• PENTAD : 9,15</li><li>• D1S1656 : 13,14</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com