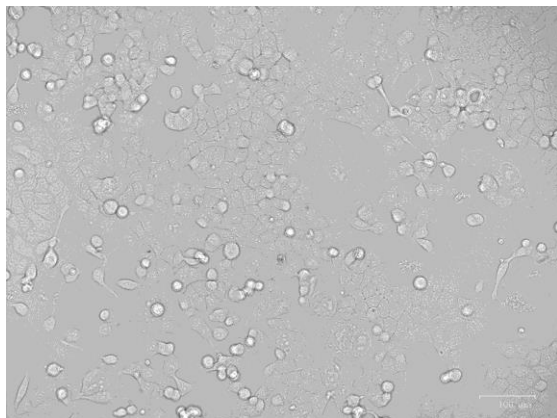


人子宫内膜腺癌细胞 (HEC-1-B Cells)

细胞货号	T9125	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818:11,13 • D13S317:11,16 • D7S820:9,11 • D16S539:11,12 • VWA 18:18 • TH01 6:7 • AMEL:X,X • TPOX:8,11 • CSF1PO:10,12 • D12S391:18,19 • FGA 21:21 • D2S1338:18,19	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

- D21S11:30,31
- D18S51:16,20
- D8S1179:13,14
- D3S1358:15,15
- D6S1043:12,18
- PENTAE:11,11
- D19S433:13,13
- PENTAD:9,13
- D1S1656:17 17.3

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com