


人回盲肠癌细胞 (HCT-8 Cells)

细胞货号	T9137	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞呈岛状生长, 生长速度较慢, 初始接种密度不宜低于 30%。 2.该细胞复苏及传代后贴壁较慢, 期间尽量避免移动, 减少观察次数。 3.细胞培养过程中有少量漂浮的细胞及细胞碎片是正常现象。 7.使用 G422 包被后细胞贴壁及生长速度会变快, 同时细胞会从岛状生长变为平铺扩散生长。	
STR 数据	- D5S818 : 13,13 - D13S317 : 8,11 - D7S820 : 10,11.3 - D16S539 : 12,13 - VWA : 18,19 - TH01 : 7,9.3 - AMEL : X,X - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 12,12 - D12S391 : 19,22 - FGA : 22,22	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D2S1338 : 17,25 • D21S11 : 29,32.2 • D18S51 : 11,17 • D8S1179 : 15,15 • D3S1358 : 17,17 • D6S1043 : 11,13 • PENTAE : 7,14 • D19S433 : 14,16 • PENTAD : 9,14 • D1S1656 : 17.3,19.3 |
|--|--|

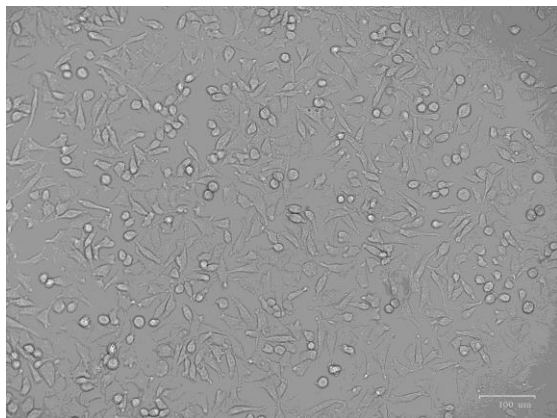

更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

