


人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 (RT4 Cells)

细胞货号	T9155	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:3，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	McCoy' s 5A (abm Cat. No. TM507) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞呈岛状生长，铺展能力有限，初始接种密度不宜低于 40%，以免细胞聚团。 2.该细胞复苏及传代后贴壁较慢，期间尽量避免移动，减少观察次数。 3.细胞培养过程中有少量漂浮的细胞及细胞碎片是正常现象。 4.使用 G422 包被后细胞贴壁及生长速度会变快，同时细胞会从岛状生长变为平铺扩散生长。	
STR 数据	- D5S818 : 11,12 - D13S317 : 8,8 - D7S820 : 9,12 - D16S539 : 9,9 - VWA : 14,17 - TH01 : 9,9.3 - AMEL : X,Y - TPOX : 8,11 - CSF1PO : 10,12	

- D12S391 : 20,22
- FGA : 22,24
- D2S1338 : 18,19
- D21S11 : 30,32.2
- D18S51 : 15,17
- D8S1179 : 13,15
- D3S1358 : 15,15
- D6S1043 : 13,19
- PENTAE : 7,10
- D19S433 : 13,13
- PENTAD : 12,13
- D1S1656 : 14,15

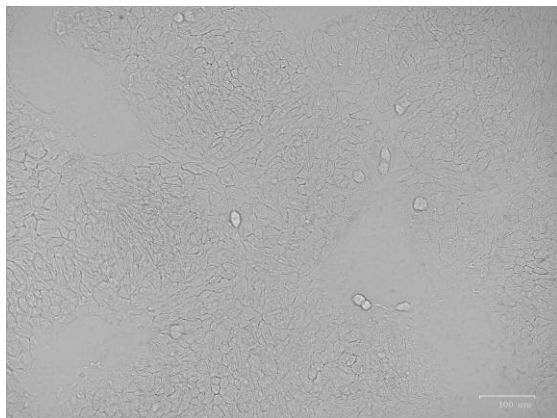