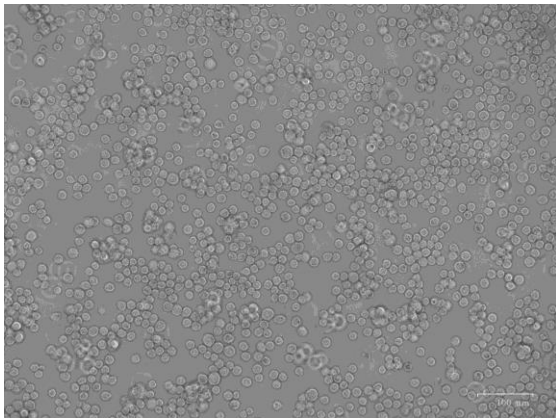


人多发性骨髓瘤细胞 (U266 Cells)

细胞货号	T9157	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• D5S818 : 11,12• D13S317 : 12• D7S820 : 11,12• D16S539 : 10• VWA : 17• TH01 : 5,7• AMEL : X,Y• TPOX : 8• CSF1PO : 12,13• D12S391 : 18• FGA : 18• D2S1338 : 20,23• D21S11 : 28,29• D18S51 : 12,14	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• D8S1179 : 13• D3S1358 : 17• D6S1043 : 11,17• PENTAE : 10,11• D19S433 : 13,15• PENTAD : 10,13• D2S441 : 10,11 |
|--|--|

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com