


## 人结直肠腺癌上皮细胞 (DLD-1 Cells)

细胞货号	T9159	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>• D5S818 : 13,13</li><li>• D13S317 : 8,11</li><li>• D7S820 : 10,12</li><li>• D16S539 : 12,13</li><li>• VWA : 18,19</li><li>• TH01 : 7,9.3</li><li>• AMEL : X,Y</li><li>• TPOX : 8,11</li><li>• CSF1PO : 12,12</li><li>• D12S391 : 19,22</li><li>• FGA : 22,22</li><li>• D2S1338 : 17,25</li><li>• D21S11 : 29,32.2</li><li>• D18S51 : 11,17</li><li>• D8S1179 : 15,15</li></ul>	

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3S1358 : 17,17</li> <li>• D6S1043 : 11,13</li> <li>• PENTAE : 7,14</li> <li>• D19S433 : 14,16</li> <li>• PENTAD : 9,14</li> <li>• D1S1656 : 17.3,19.3</li> </ul> |
|--|--|

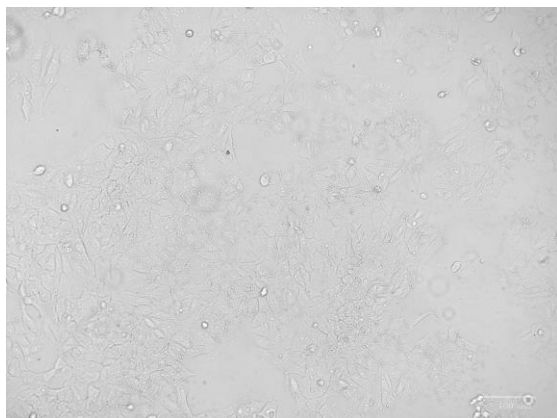

更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

