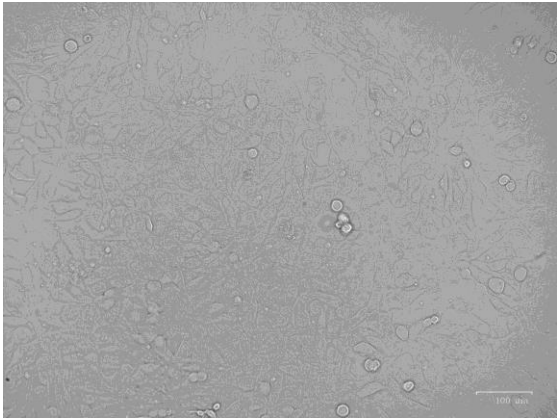


## 人正常前列腺基质永生化细胞 (WPMY-1 Cells)

细胞货号	T9160	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成肌细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM ( abm Cat. No. TM500) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>• D5S818 : 12,15</li><li>• D13S317 : 8,14</li><li>• D7S820 : 10,11</li><li>• D16S539 : 9,9</li><li>• VWA : 14,18</li><li>• TH01 : 8,9.3</li><li>• AMEL : X,Y</li><li>• TPOX : 8,11</li><li>• CSF1PO : 13,13</li><li>• D12S391 : 20,23</li><li>• FGA : 24,25</li><li>• D2S1338 : 17,20</li></ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• D21S11 : 30,31</li><li>• D18S51 : 14,16</li><li>• D8S1179 : 10,14</li><li>• D3S1358 : 15,16</li><li>• D6S1043 : 18,19</li><li>• PENTAE : 5,5</li><li>• D19S433 : 13,13</li><li>• PENTAD : 10,13</li></ul> |
|--|---|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com