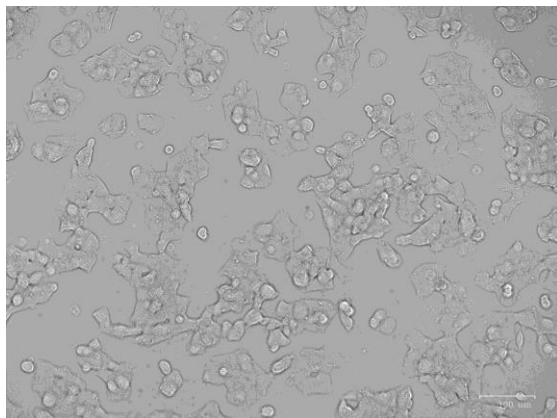


小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 (Beta-TC-6 Cells)

细胞货号	T9165	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	72-96 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) +15% HiFBS + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞培养过程中应使用热灭活血清。	
STR 数据	• 1-1 : 17 • 1-2 : 19 • 2-1 : 16 • 3-2 : 14 • 4-2 : 20.3 • 5-5 : 17, • 6-4 : 18 • 6-7 : 12,17 • 7-1 : 26.2 • 8-1 : 16 • 11-2 : 16,17 • 12-1 : 17	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



	• 13-1 : 17.1 • 15-3 : 21.3,22.3 • 17-2 : 15 • 18-3 : 16 • 19-2 : 12,13 • X-1 : 28 • TH01 : - • D5S818 :
--	---

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com