


人胰腺癌细胞 (Panc03.27 Cells)

细胞货号	T9168	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
种属来源	人	
组织来源	胰腺	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1. 该细胞形态比较薄, 增值速度不快, 前期培养需要恢复 1 周。	
STR 数据	• D5S818 : 12,13 • D13S317 : 11,12 • D7S820 : 8,13 • D16S539 : 12,12 • VWA : 16,17 • TH01 : 6,6 • AMEL : X,X • TPOX : 8,9 • CSF1PO : 10,11 • D12S391 : 23,25 • FGA : 22,26	

- D2S1338 : 17,26
- D21S11 : 29,30
- D18S51 : 18,18
- D8S1179 : 13,14
- D3S1358 : 15,16
- D6S1043 : 19,19
- PENTAE : 7,11
- D19S433 : 15,15
- PENTAD : 10,10
- D1S1656 : 12,13

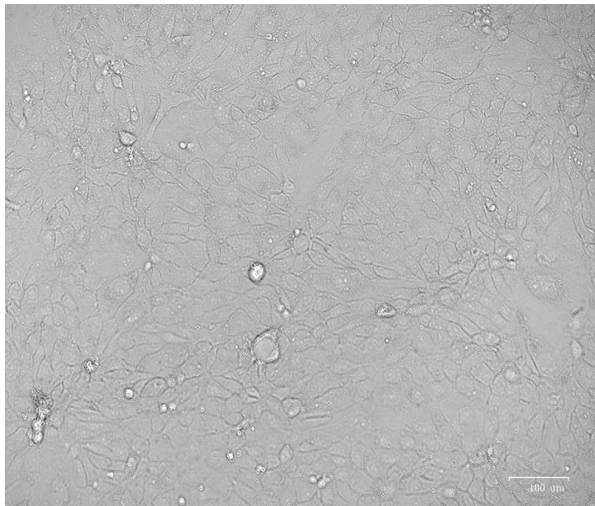