


人支气管上皮细胞 (BEAS-2B Cells)

细胞货号	T9180	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> • D5S818 : 12,13 • D13S317 : 13 • D7S820 : 10,13 • D16S539 : 12 • VWA : 17,18 • TH01 : 7,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 6,11 • CSF1PO : 9,12 • D12S391 : 17,18 • FGA : 20,24 • D2S1338 : 22,23 • D21S11 : 28,30 • D18S51 : 18,19 • D8S1179 : 13,15 	

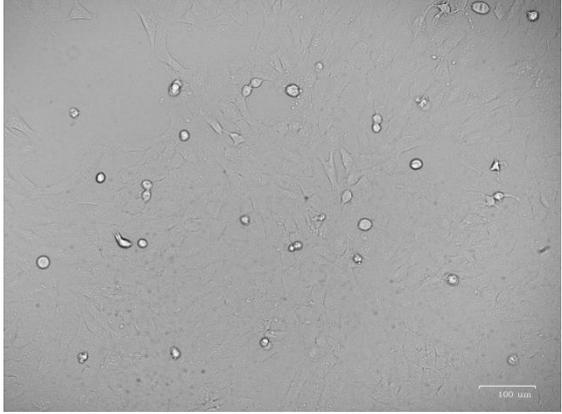

- D3S1358 : 15,17
- D6S1043 : 12,18
- PENTAE : 5,8
- D19S433 : 13.2,15.2
- PENTAD : 2.2,13
- D1S1656 : 14

 电话: 400-833-1885

 网址: www.abmGood.com

 订购: order.china@china-abm.com

 技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

