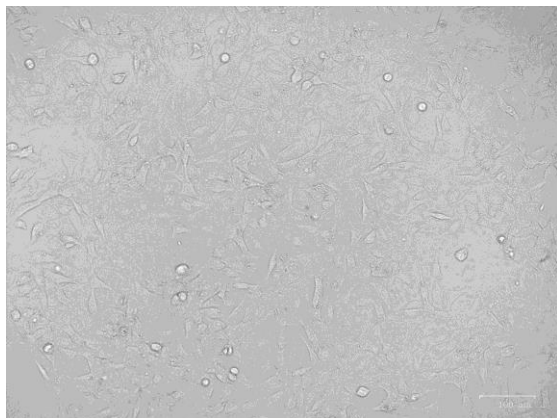


人神经母细胞瘤细胞 (SK-N-BE(2) Cells)

细胞货号	T9188	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	半贴半悬	
细胞形态	神经母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM/F12(1:1)+ 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞形态多样, 属正常现象。 2.培养密度高时, 细胞会聚集成团飘起。	
STR 数据	• D5S818 : 12,12 • D13S317 : 11,11 • D7S820 : 9,10 • D16S539 : 9,11 • VWA : 18,18 • TH01 : 6,7 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 10,10 • D12S391 : 18,24 • FGA : 22,25 • D2S1338 : 17,23	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

- D21S11 : 30,31,32.2
- D18S51 : 14,16
- D8S1179 : 13,14
- D3S1358 : 19,19
- D6S1043 : 11,19
- PENTAE : 14,18
- D19S433 : 12,13
- PENTAD : 13,14
- D1S1656 : 11,17.3

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com