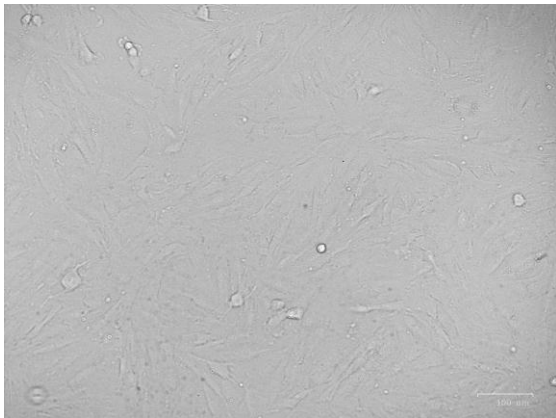


人卵巢颗粒细胞 (KGN Cells)

细胞货号	T9195	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成纤维细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37°C	
培养基	DMEM/F-12(1:1) (abm Cat. No. TM510) + 15% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞有密度依赖性，细胞密度低时，生长较慢，建议复苏在小的培养皿中，且传代比例不宜过高。传代后密度保持在 30%以上。	
STR 数据	- D5S818 : 13,13 - D13S317 : 9,9 - D7S820 : 11,11 - D16S539 : 10,12 - VWA : 17,17 - TH01 : 9,9 - AMEL : X,X - TPOX : 8,9 - CSF1PO : 10,12 - D12S391 : 19,21 - FGA : 25,26 - D2S1338 : 25,25 - D21S11 : 30,32.2 - D18S51 : 12,14 - D8S1179 : 13,14	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 15,17 • D6S1043 : 13,20 • PENTAE : 12,21 • D19S433 : 13,15.2 • PENTAD : 10,13 • D1S1656 : 15,17 |
|--|--|